


## TERMOSTAT Mini Dry Bath firmy STARLAB

Tento malý, ale výkonný suchý, termostat je vhodný pre celý rad aplikácií: reštrikčnú analýzu, denaturáciu DNA, NUB, koagulačné štúdie, in-situ hybridizáciu a „Hot Start“ termocykloverovú reakciu. Digitálny mikroprocesor ovláda nastavenie teploty kovového bloku, a rýchly nárast teploty šetrí váš pracovný čas. Prístroj je dodávaný s priehľadným vekom pre rovnomerné rozloženie teploty. Prístroj možno použiť aj ako miniatúrny vodný kúpeľ. **Inkubátor je dodávaný bez kovového bloku. Tento sa objednáva samostatne !** Môžete si ho vybrať z pomerne širokej ponuky.

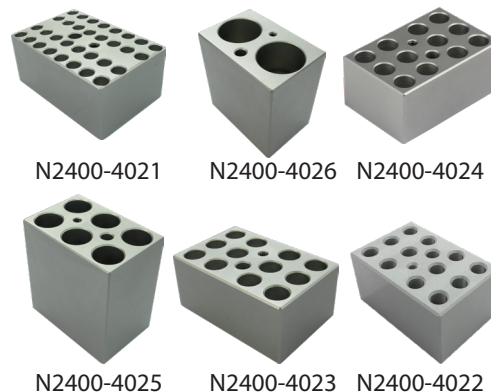

### Vlastnosti :

- Mikroprocesorom riadené nastavenie teploty a časovač.
- Jednoduchá kalibrácia používateľom.
- Môže byť tiež použitý ako vodný kúpeľ
- Digitálny displej.
- Malé rozmery.

### TECHNICKÉ PARAMETRE / OPIS

<b>Riadenie</b>	mikroprocesor	<b>Bezpečnostné zariadenie</b>	tesnosť vyhrievacieho bloku a alarm pri prehriatí
<b>Displej</b>	digitálny	<b>Materiál suchej komory</b>	lisovaná hliníková zliatina potiahnutá PTFE
<b>Prípustná pracovná teplota okolia</b>	teplota prostredia až 40 °C	<b>Materiál vkladacích blokov</b>	hliníková zliatina
<b>Teplotný rozsah (suchý termostat)</b>	5 °C nad teplotu okolia do 100 °C	<b>Časovač</b>	1 – 9999 minút, kontinuálne
<b>Teplotný rozsah (vodný kúpeľ)</b>	5 °C nad teplotu okolia do 90 °C	<b>Vyhrievací výkon</b>	50 W
<b>Rozlíšenie teplotného nastavenia</b>	0,1 °C	<b>Napájanie</b>	100 – 240 V, 2 A, 50/60 Hz
<b>Teplotná kalibrácia</b>	ÁNO	<b>Hmotnosť</b>	0,6 kg
<b>Teplotná uniformita</b>	± 0,2 °C do 37 °C	<b>Rozmery (š x h x v)</b>	125 x 153 x 97 mm
<b>Teplotná presnosť</b>	± 0,25 °C do 37 °C		

### TERMOSTAT MINI DRY BATH

Kat. číslo	Názov
N2400-4020	Mini Dry Bath Incubator
N2400-4021	Al-blok pre 32 PCR skúmaviek objemu 0,2 ml
N2400-4022	Al-blok pre 12 mikrocentrifugačných skúmaviek objemu 0,5 ml
N2400-4023	Al-blok pre 12 mikrocentrifugačných skúmaviek objemu 1,5 ml
N2400-4024	Al-blok pre 12 mikrocentrif. skúmaviek objemu 1,5/2,0 ml
N2400-4025	Al-blok pre 6 centrifugačných skúmaviek objemu 15 ml
N2400-4026	Al-blok pre 2 centrifugačné skúmavky objemu 50 ml