

JEDNODUCHÝ VORTEX firmy STARLAB

Ekonomický vortex pre rýchle a pohodlné miešanie malých objemov vzoriek. Dodáva sa s univerzálnou hlaviceou na skúmavky alebo nádobky až do priemeru 30 mm. Tento vortex má aj rad príslušenstva, ktoré umožňuje mixovanie obsahu v skúmavkách rôznej veľkosti, rovnako ako aj platničiek. Regulácia otáčok umožňuje jemné miešanie vzoriek až do vyšších rýchlostí pre intenzívne miešanie a premiešanie buniek alebo malých častíc. Protišmykové nožičky zaisťujú stabilitu na stole počas miešania.

Vlastnosti :


- Plynulá regulácia intenzity kmitania
- Dva prevádzkové režimy: kontinuálny a dotykový.
- Protišmykové nožičky.
- Široká škála príslušenstva.
- Malé rozmery.



N2400-6012



N2400-6013

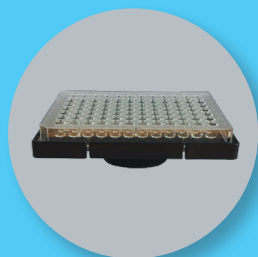

N2400-6014



N2400-6015

TECHNICKÉ PARAMETRE

Rozsah otáčok	0-2500 rpm
Prípustná prac. teplota okolia	4 – 40 °C
Prípustná prac. vlhkosť	< 80 %
Prevádzkové režimy	Dva: dotykový a kontinuálny
Typ pohybu hlavice	orbitálny
Preimer orbity	4 mm
Príkonnosť	60 W
Napájanie	220 – 230 V, 50/60 Hz
Hmotnosť	3,5 kg
Rozmery (š x h x v)	127 x 130 x 160 mm

VORTEX JEDNODUCHÝ

Kat. číslo	Názov
N2400-6010	Vortex
N2400-6011	Náhradný držiak na skúmavky do priemeru 30 mm
N2400-6012*	Adaptér na skúmavky 18 x 1,5/2,0 ml do priemeru 10 mm
N2400-6013*	Adaptér na skúmavky 8 x 15 ml do priemeru 16 mm
N2400-6014	Adaptér na 96-jamkové mikrotitračné platničky
N2400-6015	Adaptér pre použitie s N2400-6012 a N2400-6013

*použitie len v kombinácii s N2400-6015