

Fľašové dávkovače

Tieto fľašové dávkovače boli navrhnuté na presné, spoľahlivé a opakované dávkovanie médií z fľaš so zásobným roztokom. Majú vynikajúcu chemickú odolnosť voči rôznym chemikáliám, vrátane koncentrovaných kyselín, soľných roztokov, zásad a organických rozpúšťadiel.

Vlastnosti :

- Umožňujú dávkovanie priamo zo zásobnej fľaše
- Sú plne autoklávovateľné po dobu 20 minút pri teplote 121°C a tlaku 1 bar
- Vyznačujú sa vysokou presnosťou
- Otočné telo o 360° (iba modely PLUS)
- Prípojka na predlžovaciu hadičku (iba modely PLUS)
- Široká škála adaptérov pre rôzne fľaše v balení
- Recirkulačný systém (iba modely PLUS)



Fľašové dávkovače PLUS sú vybavené recirkulačným systémom pomocou, ktorého môžete nepoužitú médium vrátiť späť do zásobnej fľaše. Takto sa znižujú straty dávkovaných médií.



Fľašové dávkovače PLUS sú vybavené otočnou 360° hlavou, takže pri zmene polohy nemusíte otáčať celou fľašou.




Fľašové dávkovače PLUS sú vybavené konektorom na predlžovaciu hadičku. Táto je vhodná najmä pri dávkovaní zasychajúcich médiách a médiách, ktoré sú citlivé na vlhkosť.

Vnútrotný valec z bórsilikátového skla
- zabezpečuje vynikajúcu chemickú odolnosť



Konektor pre pripojenie predlžovacej hadičky

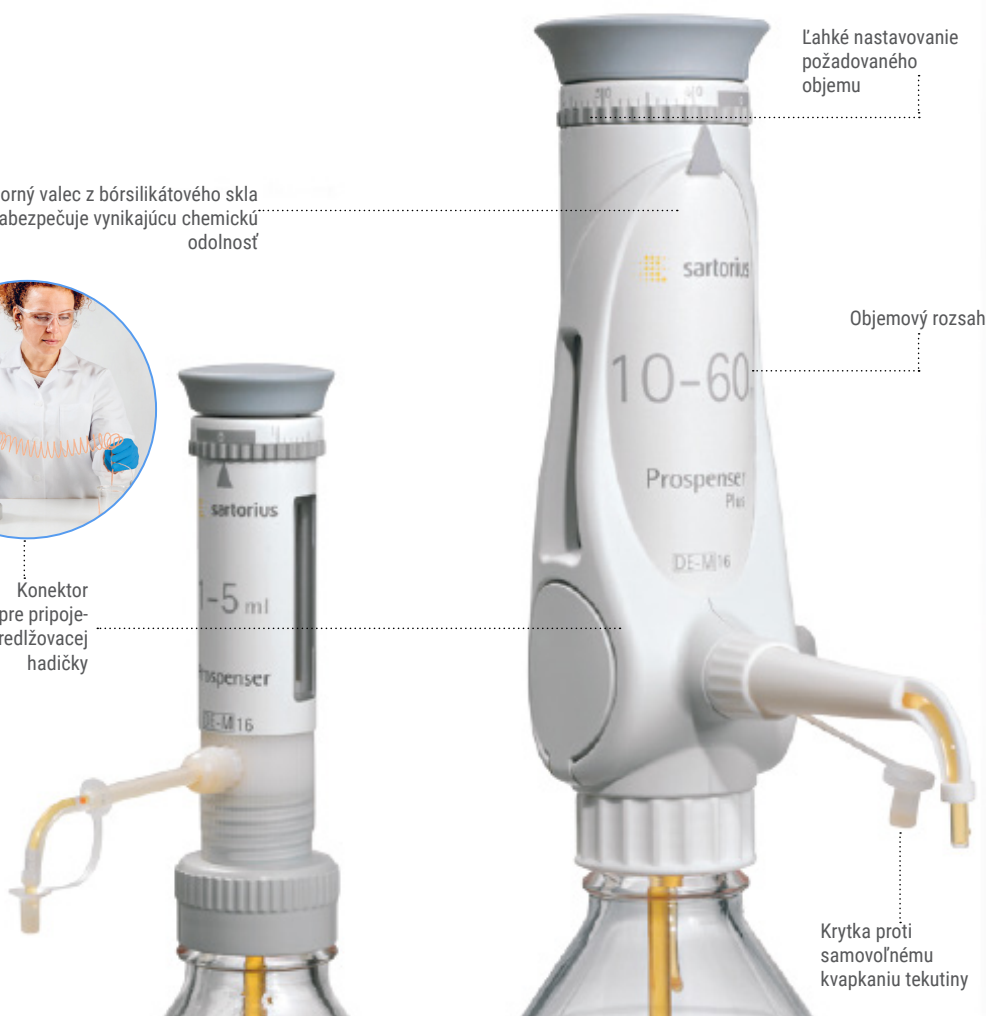

Lahké nastavovanie požadovaného objemu

Objemový rozsah

Krytka proti samovoľnému kvapkaniu tekutiny

FLAŠOVÉ DÁVKOVAČE
ÚDAJE PRE OBJEDNANIE A TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Kat. číslo	Názov	Inkrement	Testovaný objem	Nepresnosť (%) / (ml)	Nesprávnosť (%) / (ml)
LH-723060	Fľašový dávkovač 0,2-1 ml*	0,05 ml	1 ml	0,6 / 0,006	0,2 / 0,002
LH-723061	Fľašový dávkovač 0,4-2 ml*	0,05 ml	2 ml	0,6 / 0,012	0,2 / 0,004
LH-723062	Fľašový dávkovač 1-5 ml*	0,10 ml	5 ml	0,6 / 0,030	0,2 / 0,010
LH-723063	Fľašový dávkovač 2-10 ml*	0,25 ml	10 ml	0,6 / 0,060	0,2 / 0,020
LH-723064	Fľašový dávkovač 5-30 ml*	0,50 ml	30 ml	0,6 / 0,180-	0,2 / 0,060
LH-723065	Fľašový dávkovač 10-60 ml*	1,00 ml	60 ml	0,6 / 0,360-	0,2 / 0,020
LH-723070	Fľašový dávkovač PLUS 0,2-1 ml**	0,05 ml	1 ml	0,6 / 0,006	0,2 / 0,002
LH-723071	Fľašový dávkovač PLUS 0,4-2 ml**	0,05 ml	2 ml	0,6 / 0,012	0,2 / 0,004
LH-723072	Fľašový dávkovač PLUS 1-5 ml**	0,10 ml	5 ml	0,6 / 0,030	0,2 / 0,010
LH-723073	Fľašový dávkovač PLUS 2-10 ml**	0,25 ml	10 ml	0,6 / 0,060	0,2 / 0,020
LH-723074	Fľašový dávkovač PLUS 5-30 ml**	0,50 ml	30 ml	0,6 / 0,180-	0,2 / 0,060
LH-723075	Fľašový dávkovač PLUS 10-60 ml**	1,00 ml	60 ml	0,6 / 0,360-	0,2 / 0,020

Dávkovače sa dodávajú bez fliaš, tieto sa objednávajú samostatne!

*V balení sú nasledovné redukcie pre nasadenie na fľaše : A28, S40, A45. Závit na dávkovači (natívny) : A32

**V balení sú nasledovné redukcie pre nasadenie na fľaše : A32, A38 a S40. Závit na dávkovači (natívny) : A45

FLAŠOVÉ DÁVKOVAČE - Príslušenstvo a náhradné diely

Kat. číslo	Názov	Materiál	Fľ.dávkovač PLUS	Fľ.dávkovač Štandard (1,2,5 a 10ml)	Fľ.dávkovač Štandard (30 a 60ml)
LH-721647	Dávkovacia hlava, štandard	FEP	●		
LH-721655	Dávkovacia hlava, štandard	FEP		●	
LH-721656	Dávkovacia hlava, štandard	FEP			●
LH-721648	Dávkovacia hlava, 1,5mm špirála	FEP	●		
LH-721649	Dávkovacia hlava, 3,0mm špirála	FEP	●		
LH-721657	Dávkovacia hlava, špirála	FEP		●	
LH-721658	Dávkovacia hlava, špirála	FEP			●
LH-721653	Dávkovacia hlava, Luer-lock	FEP/PP	●		
LH-721654	Dávkovacia hlava, Luer-lock	FEP/PP	●		
LH-721659	Dávkovacia hlava, Luer-lock	FEP/PP			●
LH-721660	Dávkovacia hlava, Luer-lock	FEP/PFA			●
LH-721678	Predĺžovacia hadička, 310mm	FEP	●		●
LH-721680	Predĺžovacia hadička, 310mm	FEP		●	
LH-721679	Predĺžovacia hadička, 400mm	FEP	●		●
LH-721681	Predĺžovacia hadička, 400mm	FEP		●	
LH-721682	Recirkulačná hadička, 70mm	FEP	●		
LH-721743	Podstavec pre fľaše s 0 = 75-120mm	Silikón	●	●	●

V ponuke je aj široká škála adaptérov pre rôzne typy fliaš resp. pre ich závit. V prípade potreby Vám pošleme bližšie informácie a cenovú ponuku.

