

Minicentrifúga od STARLABU

Krivkám v ústrety!



Milujeme každú krivku tejto centrifúgy.

ULTRA ĽAHKÉ OVLÁDANIE

Použitie centrifúgy je tak jednoduché! Stačí len vložiť skúmavky do rotora, zavrieť veko a odstredovať.



starlab



NA ZASTAVENIE STAČÍ JEDINÝ DOTYK

Jediným dotykom zastavíte odstreďovanie a zároveň odomknete veko centrifúgy. Prístup k vašim vzorkám nebol nikdy jednoduchší - ovládanie je možné iba jednou rukou. Taktiež je centrifúgu možné ovládať aj v rukaviciach!



Minicentrifúga.

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Vďaka svojmu modernému dizajnu bude na vašom pracovnom stole vyzeráť fantasticky! No minicentrifúga firmy Starlab nie je len o štyle, ale aj o výkone. Jedná sa o kompaktný a odolný prístroj, ktorý ponúka tichý a hladký chod spolu s jedinečnými vlastnosťami.

- Rýchly štart po zatvorení veka
- Magnetický zámok veka
- Hladký, tichý chod
- Jednodotkové tlačidlo STOP pre okamžité zastavenie a automatické uvoľnenie veka



VIAC INFO

MAGNETICKÝ ZÁMOK VEKA
ponúka nenáročnú obsluhu jednou rukou

RÝCHLY ŠTART
stačí zatvoriť veko a odstreďovanie sa automaticky spustí!

BEZ NÁRADIA
rýchla a jednoduchá výmena rotora

FUNKCIA STOP
pre rýchle zastavenie a uvoľnenie veka jediným dotykom

TAK TICHÁ
úroveň hluku len 55 dBA!



KRIVKÁM V ÚSTRETY

Minicentrifúga firmy Starlab má kompaktný pôdorys, ktorý z nej robí perfektného pomocníka pre centrifugáciu Vašich vzoriek. Stačí len vložiť skúmavky, zatvoriť veko a prístroj sa automaticky spustí. Ak chcete cyklus ukončiť, stlačte tlačidlo STOP. Zastavenie odstreďovania je okamžité a veko sa automaticky otvorí. Magnetické uzamykanie predchádza možnému opotrebovaniu mechanizmu a nevyžaduje si tak žiadnu údržbu.



Lahká údržba

plochých povrchov, v prípade rozliatych kvapalín chráni prístroj vyvýšený okraj



Výmena rotora je rýchla a jednoduchá

"QUICK & EASY" - stačí len vybrať a zatlačiť - výmena rotora nevyžaduje žiadne nástroje, ktoré by ste museli hľadať pri každej zmene veľkosti Vašich vzoriek

DODÁVANÁ S DVOMI ROTORMI

Skúmavkový rotor

Kapacita : až 8 x 1,5 / 2,0 ml mikrocentrifugačné skúmavky, alebo 8 x kónické / mikroskúmavky so skrutkovacím uzáverom s okrajom
Tento rotor je možné použiť aj s 0,2 ml alebo 0,5 ml samostatnými skúmavkami, ak použijete adaptéry dodávané v balení

PCR rotor

Kapacita : až 4 x 0,2 ml 8-násobné strípy alebo 32 x 0,2 ml samostatné PCR skúmavky

Dokonalá pre každodenné použitie.

ZAPNITE A ODS TREĐUJTE

Minicentrifúga fy. Starlab je ideálnym partnerom pri potrebe rýchleho odstredovania kondenzátu, vortexovaných alebo rozmrazených vzoriek.

Je určená pre aplikácie vyžadujúce relatívne nízku odstredivú silu, ako je mikrofiltrácia, separácia buniek a rýchle odstredovanie zo stien mikrocentrifugačných skúmaviek a vrchnákov.




Špecifikácia rotorov

Typ rotora	Max. kapacita	Ma. dĺžka skúmavky	Max. priemer skúmavky	Například
Skúmavkový rotor	8 skúmaviek	45 mm	11 mm	1,5/2,0 ml mikrocentrifugačné skúmavky. 0,5 ml mikroskúmavky s okrajom so skrutkovacím uzáverom. 1,5/2,0 ml mikroskúmavky so skrutkovacím uzáverom s okrajom/bez okraja.
Rotor s adaptéromi pre 0,2 ml skúmavky	8 skúmaviek	19 mm	6,0 mm	0,2 ml PCR skúmavky
Rotor s adaptéromi pre 0,5 ml skúmavky	8 skúmaviek	45 mm	8,0 mm	0,5 ml PCR alebo mikrocentrifugačné skúmavky
PCR rotor	4 x stríp alebo 32 x PCR skúmavka	35 mm	6,0 mm	0,2 ml PCR strípy alebo samostatné



ROTOR NA SKÚMAVKY

- Max. rýchlosť: 2.500 x g (6.500 ot./min.)
- Max. kapacita: 8 x 1,5 / 2,0 ml skúmavky
- Adaptéry pre 0,2 ml a 0,5 ml skúmavky

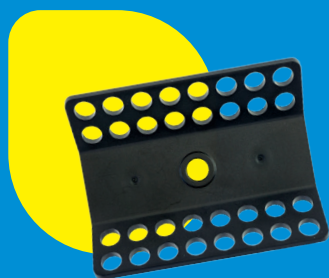

ROTOR NA PCR STRÍPY

- Max. rýchlosť: 2.500 x g (6.500 ot./min.)
- Max. kapacita: 4 x PCR strípy alebo 32 PCR skúmaviek



Rotor pojme až osem mikrocentrifugačných skúmaviek...



... alebo až osem kónických prípadne voľne stojacich mikroskúmaviek so skrutkovacím uzáverom.



Rotor pre PCR strípy pojme 4 PCR strípy...



... alebo až 32 samostatných PCR skúmaviek.





**Toto je
pohľad
zblízka.**

TESTOVANÁ - NA KVALITE NÁM ZÁLEŽÍ


Minicentrifúga firmy Starlab prešla dôkladným testovacím procesom. Dôsledne sme testovali mechanizmus otvárania veka, pánty a odolnosť otvoru kde sa vkladá rotor počas výmeny, aby sme sa uistili, že minicentrifúga vydrží každodennú laboratórnu záťaž.

Na túto minicentrifúgu poskytujeme 2-ročnú záruku.





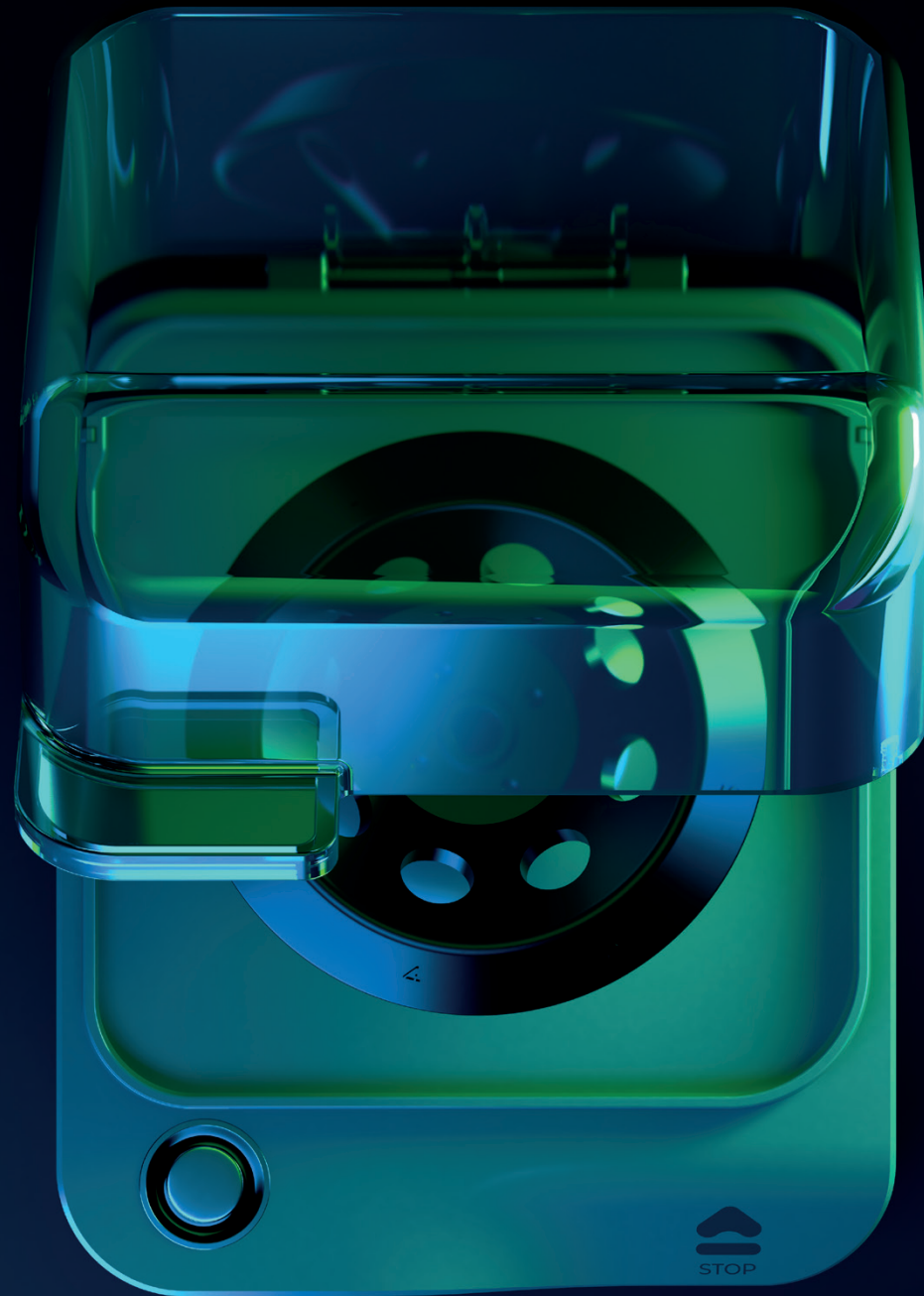

Otvorte sa
novým
objavom.

NEZASEKNEM SA!

Ak by sa počas odstredovania z nejakého dôvodu prerušilo napájanie, prístroj má funkciu vyradenia zámku z činnosti - veko sa otvorí, takže vaše vzácne vzorky nezostanú uzamknuté vo vnútri prístroja. Mysleli sme naozaj na všetko!



Informácie k objednávke.

Popis	Kat. číslo
 Minicentrifúga ²⁾	S8030-5000
Príslušenstvo	
 Rotor na skúmavky pre 8 x 1,5/2,0 ml skúmavky	S8030-5010
 Rotor na PCR stripy pre 32 x 0,2 ml PCR skúmavky alebo 4 x PCR stripy	S8030-5011
 Sieťový adaptér so štyrmi vymeniteľnými koncovkami, 24 V, 1 A pre EÚ, UK, US & AUS	S8030-5012
 Adaptéry podo skúmavkového rotora pre 0,5 ml skúmavky, bal.= 8 ks	S8030-5013
 Adaptéry podo skúmavkového rotora pre 0,2 ml skúmavky, bal.= 8 ks	S8030-5014

²⁾ Dodávaná so sieťovým adaptérom a štyrmi vymeniteľnými koncovkami, 1 x skúmavkový rotor, 1 x rotor pre PCR stripy, 1 x balenie adaptérov pre 0,5 ml skúmavky, 1 x balenie adaptérov pre 0,2 ml skúmavky

Technická špecifikácia	
Maximálna rýchlosť otáčok	6.500 ot./min. ± 1 %
Maximálne preťaženie	2.500 x g
Hladina hluku	55 dBA
Prípustná pracovná teplota okolia	2°C - 40°C
Prípustná prac. vlhkosť prostredia	≤ 80 %
Napájanie	100 - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Vstup	24 V DC 12 W
Váha	< 1,2 kg
Rozmery (Š x V x H)	160 x 130 x 112 mm



VIAC INFO

Ideálny partner.



TubeOne®

Chrňte svoje vzorky pomocou mikrocentrifugačných skúmaviek TubeOne®. TubeOne® zostanú spoľahlivo uzavreté počas ohrevu, mrazenia alebo odstredovania. Opticky čisté skúmavky majú tiež matnú plochu na písanie.



VIAC INFO



PCR SKÚMAVKY

Ultra tenké, rovnomerné steny zaisťujú optimálny prenos tepla. Dostupné v objemoch 0,2 ml alebo 0,5 ml s možnosťou výberu typov uzáverov. K dispozícii sú aj skúmavky so zmiešanými farbami



VIAC INFO



MIKROSKÚMAVKY SO SKRUTKOVACÍM UZÁVEROM

Vhodné pre mnoho aplikácií od mrazenia až po zahrievanie. Skúmavky dostupné od 0,5 ml do 2,0 ml, s rôznymi typmi a farbami uzáveru na výber. Vytvorte si vlastné farebné kombinácie.



VIAC INFO



PCR STRÍPY

Vytvorte si vlastné strípy kombináciou individuálne balených strípov s vami požadovanými vrchnákmi rôznych typov, alebo si vyberte strípy s pripevnenými uzávermi. Ultra tenké, rovnomerné steny zaisťujú optimálny presun tepla.



VIAC INFO

VYBAVTE VAŠE LABORATÓRIUM VYSOKO KVALITNÝMI PRODUKTMI SPOLOČNOSTI STARLAB

Laboratórne produkty firmy Starlab sú navrhnuté na opakované každodenné použitie v širokom spektre laboratórnych aplikácií. Naše zariadenia sa vyznačujú robustnou konštrukciou, spoľahlivosťou, jednoduchou obsluhou a nenáročnou údržbou. Užívateľské pohodlie, skvelé funkcie a malé rozmery sú základom nášho procesu dizajnovania. Navštívte náš web a objavte ďalšie skvelé produkty a vybavte si nimi Vaše laboratórium.



POZOR! Nové činné dosky zobrazené na MC24 & Mixer HC ešte nie je možné zakúpiť.



Distribútor pre SR:

ECOMED

Dlhá 191/44
Žilina-Bytčica
010 09 SLOVENSKO

Tel.: +421(0)41/5006744
Mob.:+421 911 709 660
ecomed@ecomед.sk
www.ecomed.sk



MINICENTRIFÚGA STARLAB. KRIVKÁM V ÚSTRETY.

Minicentrifúga Starlab má kompaktný pôdorys, vďaka čomu je dokonalým pomocníkom pri Vašej práci.

Používanie je také jednoduché! Stačí vložiť skúmavky, zavrieť veko a už odstreďujete! Ak chcete cyklus ukončiť, dotknite sa tlačidla Stop, čím spustíte super rýchle brzdenie a uvoľníte veko.

Myslíme si, že sa vám bude páčiť aj to, ako vyzerá!



[https://ecomед.sk/produkt/
minicentrifuga-starlab/](https://ecomед.sk/produkt/minicentrifuga-starlab/)